


NOVO !



TECHNOCLOT® PT Owren

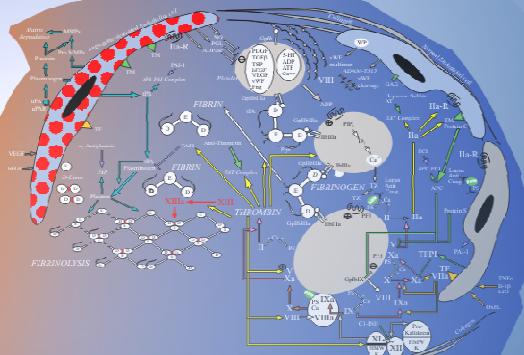

Standardizovani zečiji tromboplastin sa dodatkom fibrinogena i Faktora V.




Nova generacija reagensa Thrombotest®

A clear view into the future!


TECHNOCLOT® PT Owren, nova generacija reagensa Thrombotest®

Univerzalni reagens za praćenje različitih oralnih antikoagulanasa (OAT), uključujući i OATa najnovije generacije


- Povećana stabilnost posle rastvaranja
- TECHNOCLOT® PT Owren pokazuje visoku osetljivost na Faktor II, VII i X
- Ne podleže uticaju promena nivoa Faktora V i fibrinogena u uzorku

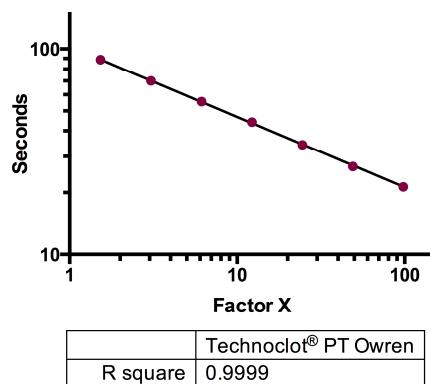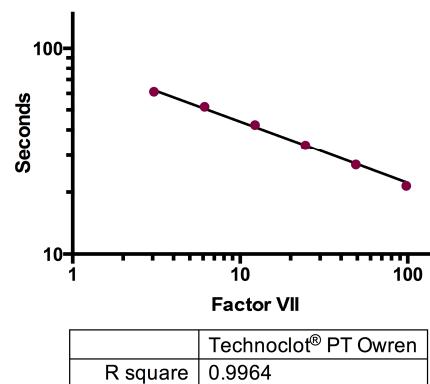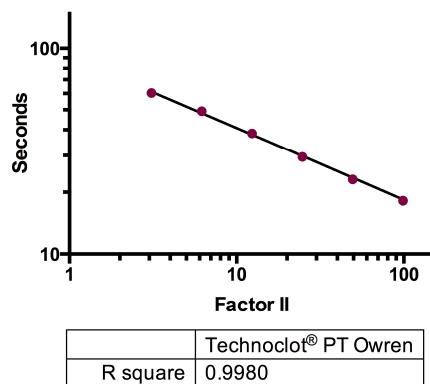

KORELACIJA SA REAGENSIMA Thrombotest® i Normotest®

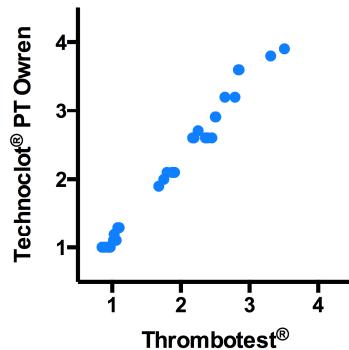

	Thrombotest® vs. TECHNOCLOT® PT Owren	Normotest® vs. TECHNOCLOT® PT Owren
Pearson r	0.992	0.993
P value	< 0.0001	< 0.0001

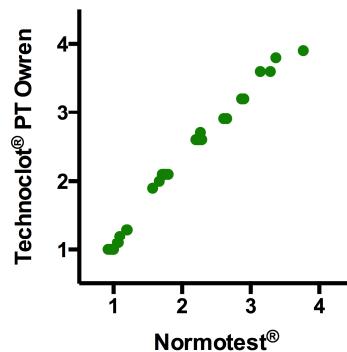

KALIBRACIJA

TECHNOCLOT® PT Owren se može kalibrirati korišćenjem AK Calibrant®, za razliku od prethodne generacije reagenasa (kod kojih je kalibracija predstavljala problem).

Osigurava se univerzalnost rezultata u različitim laboratorijama.

TECHNOCLOT® PT Owren je dizajniran za praćenje OATa i na mehaničkim i na optičkim koagulometrima